

# Sacco und Gedis

Die CONVIS-Eberstation bietet ihren Kunden zwei verschiedene Spermaverpackungen an


## Sacco: kostensparend

Das SACCO vereinigt die Vorteile der Tube und des Blister

1. Der Verschluss des SACCO wird abgebrochen und kann zum Verschließen des Beutels wieder verwendet werden.
2. Das SACCO kann während der Besamung mittels der vorgestanzten Löcher aufgehängt werden.
3. Das Wenden der Spermaverpackung entfällt, weil eine optimale Verteilung der Spermaflüssigkeit gegeben ist.



## Gedis: zeitsparend

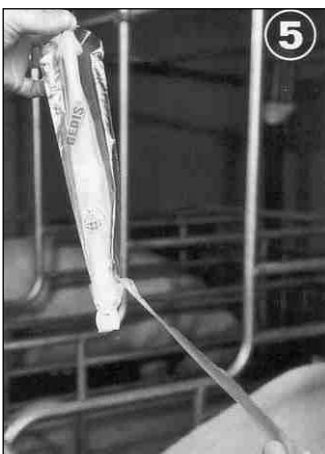

1. Den GEDIS horizontal lagern und bei einer Temperatur von + 17° C (+/- 2° C) aufbewahren.
2. Die Scham gründlich säubern.
3. Das Sperma homogenisieren durch 3x klopfen des GEDIS in der hohlen Hand. Den GEDIS umdrehen und erneut 3x klopfen.
4. Den roten Verschluss in der Schutzhülle abknicken.
5. Die Schutzhülle beim Einschnitt nach unten aufreißen.
6. Den Kopf des GEDIS (nur bei Jungsaugen) und den vorderen Teil des Ballons mit Gleitmittel (immer bei Jung- und Altsauen) versehen.
7. Die Verlängerung befestigen. Den GEDIS einführen und die Schutzhülle ganz umklappen (nicht entfernen!). Drücken bis der Widerstand vom Gebärmutterhals merklich spürbar wird. Die Verlängerung unter Beibehalten des Drucks eine viertel Umdrehung nach links drehen.
8. Die Verlängerung loshaken und rausziehen, dabei aber das Lösen des GEDIS vom Gebärmutterhals vermeiden. Die Sau besamt sich nun von selbst. Nach etwa 10 Minuten den GEDIS mit Hilfe der Schutzhülle entfernen

